



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Массажер для тела Sculptural со
сменными насадками



СОДЕРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	3
ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ	5
ОПИСАНИЕ	6
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	6
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	8
ЧИСТКА И УХОД	9

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием устройства полностью прочитайте эти инструкции.
- Этот прибор предназначен только для домашнего использования, а не для профессионального использования. Использование его любым способом, кроме как в соответствии с инструкциями, может быть опасным. Не используйте этот прибор в качестве замены для надлежащего медицинского обслуживания.
- Всегда храните прибор и его упаковку в недоступном для детей и инвалидов месте. Когда вы используете его в их присутствии, будьте предельно осторожны.
- Данное устройство не предназначено для использования людьми (включая детей), чьи физические, сенсорные или умственные способности нарушены или которым не хватает опыта или знаний, если только они не находятся под наблюдением или не получили инструкций о том, как использовать устройство ответственным лицом за их безопасность.
- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
- Не модифицируйте и не ремонтируйте прибор. В случае возникновения каких-либо проблем со шнуром или любой другой частью прибора, не используйте его и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или послепродажным обслуживанием производителя или персоналом с аналогичной квалификацией для предотвращения возможных опасностей.
- Не используйте детали или аксессуары, не поставляемые или не рекомендованные SOLAC.
- Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что указанное напряжение соответствует напряжению в вашем доме.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


- Всегда отключайте прибор от сети после использования, а также перед снятием или установкой деталей и перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию или чистке. Также отключите в случае

отключения электричества. Когда вы подключаете или отключаете прибор, он должен быть выключен.

- Не тяните за шнур питания и не вешайте прибор за шнур. Всегда отключайте прибор от сети, потянув за вилку, задел шнур. Не используйте рядом с ваннами, раковинами, душевыми кабинами или другими приемниками, содержащими воду. Если она не попадет в воду, НЕ пытайтесь ее засовывать. Отключите его немедленно.
- Никогда не погружайте основной корпус в воду или любую другую жидкость и не ставьте его в посудомоечную машину. Прибор не должен соприкасаться с водой во время чистки.
- Никогда не оставляйте прибор открытым для воздействия на элементы.
- Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками во время дыхания. • Никогда не погружайте прибор в воду и не используйте его во время принятия душа или ванны. Избегайте попадания воды на прибор или шнур питания. Никогда не оставляйте прибор работающим на мокрой поверхности или ткани.

ВАЖНО: Если вы хотите утилизировать прибор, НИКОГДА не выбрасывайте его в мусорное ведро. Отнесите его в CLEANPOINT или центр сбора отходов, ближайший к вашему дому, для переработки. Это поможет вам заботиться об окружающей среде.

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ

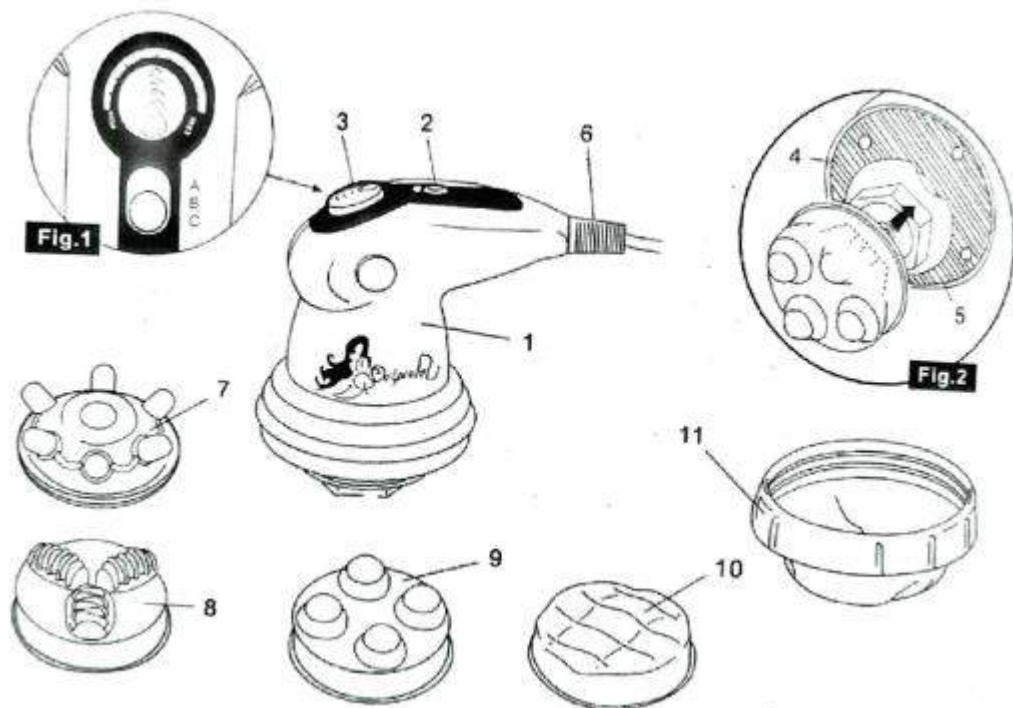

1. Основная часть прибора
2. Выкл. / Массаж / массаж + ИК-переключатель
3. Регулируемая интенсивность массажа
4. Излучатель инфракрасного излучения
5. Адаптер для массажной головки
6. Шнур
- 7 Массажная головка для пальцев
8. Роликовая массажная головка
9. Шаровая массажная головка
10. Голова в форме волны
11. Волнообразная головка

Электрические характеристики

Напряжение питания зарядного устройства: 220-240В, 50Гц, 25Вт

ОПИСАНИЕ

Профессиональная система липомоделирования.

Эффективно борется с целлюлитом и вялостью дома.

Вдохновленный профессиональными техниками массажа, этот массажер последнего поколения обеспечивает эффективный терапевтический массаж в домашних условиях и особенно подходит для тех, кто страдает от целлюлита, задержки жидкости и вялости.

Его эффективность заключается в его мощном двигателе, который производит одновременно вращающиеся и вибрирующие движения. Это сложное движение обеспечивает подкожный массаж, усиливает кровоток, стимулирует лимфодренаж и кровообращение, улучшает эластичность кожи. Sculptural обеспечивает эффективный массаж, усиленный эффектами инфракрасного тепла, перемещает жир, нагревает и истощает жир, а также разглаживает неровную «кожу апельсиновой корки».

Sculptural применяет движения трения и разминания, копируя движения рук опытного терапевтического массажа.

Скульптурная конструкция эргономично разработана для удобного домашнего использования, позволяя пользователю делать массаж в любое время и в любом месте.

Для эффективных испытаний мы рекомендуем использовать Sculptural в течение 15 минут каждый день. Этот массажер можно использовать со специальными лечебными кремами (укрепляющий или антицеллюлитный).

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1 Помассируйте область не более пяти минут. Используйте вашу чувствительность в качестве руководства для определения продолжительности массажа.

2 Используйте массажную головку, указанную для вашего лечения.
«Массаж пальцев» (7).

Имитирует профессиональный массаж, выполняемый пальцами. Подходит для применения при целлюлите, рефлексотерапии стоп (массаж стоп) и нежном массаже мышц.

Использование «роликовой» головки (8).

Эта головка дает немедленные результаты, она устраняет целлюлит, противодействует вялости, стимулирует течение и возвращение крови, тонизирует мышцы, выполняет лимфодренаж, уменьшает объем, снимает глоток, ишиас и люмбаго, разогревает мышцы, расслабляет, снимает стресс и т. д.

Использование «массажных шариков» для головы (9)

Подходит для деликатных зон, таких как лицо, грудь, шея и грудь. Активирует и укрепляет мышцы, помогая укрепить кожу, придавая ей упругость и упругость. Улучшает кровообращение в области живота, выводит локализованные токсины и улучшает работу кишечника, предотвращая запоры.

Использование «волнообразной» головы (10) Имитирует профессиональный массаж, выполняемый ладонью, тонизируя и улучшая кровоток. Фрг используют в области бедер и ягодиц.

Использование тканевой головки «для защиты головы» (11). Для повышения комфорта накройте подходящую обрабатывающую головку тканевой головкой. О Этот аксессуар нельзя использовать с кремами. Аксессуар для ткани (11) можно использовать только с волнообразной головкой (10).

Использование его с другими головками может повредить ткань, и массаж будет менее эффективным.

3. Регулятор интенсивности позволяет регулировать интенсивность массажа по мере необходимости.

Используйте низкую настройку для лечения области деликатеса (лицо, шея, грудь, ноги с варикозным расширением вен) или беременных женщин. Используйте самые высокие настройки для лечения менее чувствительных участков тела.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Это устройство было создано для терапевтического массажа против целлюлита, задержки жидкости и вялости. Не используйте его для других целей.

Спросите своего врача, есть ли у вас проблемы со здоровьем, например, если вы используете кардиостимулятор.

Не используйте массажер, если у вас кожная сыпь или воспаление.

Не используйте этот продукт перед сном. Массаж может оказывать стимулирующее действие и заставит вас дольше заснуть.

Не используйте массажер, лежа в кровати.

Массажер имеет нагретую поверхность. Люди, нечувствительные к теплу, должны быть осторожны при использовании устройства.

Защитите ваши глаза от воздействия инфракрасного излучения. Чрезмерное инфракрасное излучение может быть вредным, поэтому избегайте длительного воздействия инфракрасных лучей.

Не используйте прибор более 15 минут. Постоянное использование прибора в течение более 15 минут может привести к его перегреву, что сократит срок его службы. Дайте ему остыть, прежде чем продолжить его.

1 Подключите прибор.

2 Установите переключатель (2) в положение (B / массаж) или в положение (C / массаж + инфракрасный (ИК)) в соответствии с необходимой обработкой (рис. 3).

3 Установите соответствующую головку (7). (8). (9) или (10) для требуемой обработки на адаптере головки (5) (рис. 2).

4 Если хотите, наденьте защитную ткань на голову для обработки (11).

5 Установите интенсивность массажа с помощью контроллера (3) в соответствии с областью, в которой вы собираетесь работать, и чувствительностью к массажу. Для этого поверните регулятор пальцем в ту или другую сторону в соответствии с желаемой настройкой интенсивности (рис. 3).

6 Когда вы закончили пользоваться массажером, установите переключатель 82) в положение (А / выкл).

7 Отключите прибор.

Чтобы выполнить массаж с желаемым эффектом в каждой области и для каждой процедуры, следуйте инструкциям на рис. 3 относительно того, какую головку использовать, направление для массажа и положение переключателя (2) (В или С / массаж или массаж + ИК).

ЧИСТКА И УХОД

Не используйте растворители, моющие средства или абразивные средства.

1 Отключите прибор от сети.

2 Используйте сухую ткань для чистки снаружи.

Хранение

- Если прибор не используется, отключите его от сети и храните в прохладном, сухом месте.
- Во избежание повреждения кабеля не перекручивайте, не тяните его и не наматывайте вокруг прибора. Если он поврежден, немедленно замените его квалифицированным персоналом.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**