



# MINICAM24

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Массажер для лица и шеи  
микротоковый Iкан с RF лифтингом**



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Об устройстве .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Эксплуатация.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Обработка светодиодным светом.....</b>	<b>4</b>
<b>4. Техника безопасности .....</b>	<b>4</b>
<b>5. Гарантийное обслуживание неисправного товара .....</b>	<b>4</b>
Товар надлежащего качества .....	6
Товар ненадлежащего качества .....	6

## 1. Об устройстве

Устройство рекомендуется использовать при следующих случаях:

- Убрать линии и морщины;
- Восстановить кожу, поврежденную ультрафиолетом;
- Предотвратить старения кожи;
- Обработать кожу, склонной к акне;
- Устранить пигментные пятна.

1. Электрическая стимуляция мышц.

Используется для активации клеток кожи, стимуляции омоложения коллагена, повышения эластичности кожи, смягчения морщин и придания коже гладкого и здорового вида.

2. Мезопорация.

Мезотерапия — это процедура, при которой микроиглы прокалывают кожу, обеспечивая доставку активных веществ в более глубокие слои кожи.

3. Электропорация.


Электропорация позволяет транспортировать коллаген и гиалуроновую кислоту глубже в кожу. Электропорация позволяет добиться более высоких результатов при использовании средств по уходу за кожей без использования игл.

4. Радиочастотное воздействие.

Радиочастотное воздействие может использоваться для пациентов с любым типом кожи и обеспечивают различную глубину проникновения, что позволяет увеличить сокращение коллагена и выработку нового коллагена.

5. Световая энергия светоизлучающих диодов (LED).

Светодиодный свет используется для процедуры по уходу за кожей, которая делает кожу упругой, повышая выработку коллагена, лечит прыщи легкой и средней степени тяжести. Светодиодный свет работает, посылая энергетические очаги света в более глубокие слои кожи. Светодиодные процедуры могут минимизировать тонкие линии и морщины, лечить солнечные повреждения и растяжки. и уменьшить покраснение после более агрессивных процедур IPL или лазера.

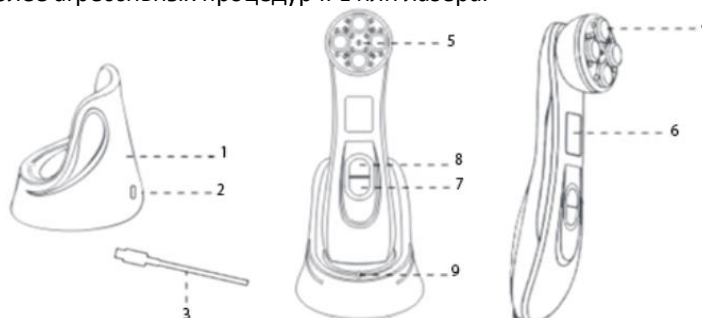

1. База для зарядки;
2. Разъем для зарядки;
3. USB-зарядка
4. Проводящая головка;
5. Светодиодная панель;
6. ЖК-экран;
7. Питание;
8. Кнопка выбора;
9. Индикатор зарядки.

## 2. Эксплуатация

1. Перед первым использованием зарядите устройство в течение 3 часов. Для зарядки вставьте разъем USB-кабеля в устройство, а другой конец кабеля в разъем для зарядки и подключите к источнику питания;
2. После очистки кожи нанесите на кожу предпочитаемую сыворотку;
3. Нажмите «Питание». Загорится красный светодиодный индикатор, и устройство перейдет на уровень интенсивности 1;
4. Отрегулируйте уровень интенсивности в соответствии с типом кожи и личными предпочтениями.
5. Отрегулируйте интенсивность, нажав кнопку питания:
  1. Нажмите один раз для выбора уровня интенсивности 1;
  2. Нажмите дважды для выбора уровня интенсивности 2;
  3. Нажмите три раза для выбора уровня интенсивности 3;
  4. Нажмите четыре раза для выбора уровня интенсивности 4;

5. Нажмите пять раз для уровня интенсивности 5;
  6. Нажмите шесть раз, чтобы выключить устройство.
6. Медленно перемещайте устройство снизу вверх по лицу и изнутри наружу. Во время использования кожа может нагреваться, и это нормально. Устройство автоматически отключится через 10 минут использования. Рекомендуется использовать устройство 3 раза в неделю по 10 минут каждый раз. Также рекомендуется использовать сыворотку для кожи, чтобы кожа оставалась влажной во время каждой обработки этим устройством.

### 3. Обработка светодиодным светом

Режим 1-Обработка красным светодиодом:

Красный светодиодный свет используется для разглаживания морщинистой кожи и улучшения регенерации коллагена и эластичности кожи. Нажмите кнопку выбора один раз, чтобы войти в режим 1.

Режим 2-Обработка зеленым светодиодом:

Зеленый светодиодный свет используется для борьбы с темными пятнами или обесцвеченной кожей, предотвращая перепроизводство меланина. Дважды нажмите кнопку выбора, чтобы войти в режим 2.

Режим 3- Обработка синим светодиодом:

Синий светодиодный свет используется для лечения прыщей и жирной кожи. Нажмите кнопку выбора три раза, чтобы войти в режим 3.

Режим 4- Обработка желтым светодиодом:

Желтый светодиодный свет используется для осветления кожи. Подходит для кожи с темными пятнами и тусклыми участками. Нажмите кнопку выбора 4 раза, чтобы войти в режим 4.

Режим 5- Обработка розовым светодиодом:

Розовый светодиод используется для отбеливания кожи. Нажмите кнопку выбора 5 раз, чтобы войти в режим 5.

Розовый мигающий светодиод используется для облегчения проникновения средств по уходу за кожей. Нажмите кнопку выбора 6 раз, чтобы войти в режим 6.

Нажмите кнопку выбора 7 раз, чтобы выключить функцию светодиодного освещения.



### 4. Техника безопасности

Запрещено использовать при следующих болезнях: болезни сердца, лихорадка, инфекционные заболевания, рак, открытые порезы, острое заболевание, гипотония, гипертония, установка кардиостимулятора, искусственное сердце или легкие, во время лечения, кожные заболевания, солнечные ожоги.

1. Во избежание неисправности или возгорания прекратите использование в случае сильного нагрева;
2. Пожалуйста, не роняйте и не ударяйте устройство;
3. Постоянно наносите сыворотку во время использования;
4. Пожалуйста, не используйте устройство, если шнур питания поврежден;
5. Используйте устройство только по назначению, как описано в данном руководстве;
6. Не храните и не используйте устройство в местах с высокой температурой и влажностью, например, под солнечными лучами, рядом с огнем, в ванной комнате и т. д., чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током. Не используйте и не размещайте его внутри или рядом с высокотемпературным устройством.

### 5. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;

- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара. По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

#### **Условия проведения гарантийного обслуживания**

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

#### **Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;

- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

### **Товар надлежащего качества**

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

### **Товар ненадлежащего качества**

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66. Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр  
Контакт WhatsApp



**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**