



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Физиотерапевтический EMS аппарат FisioTech 12 режимов




СОДЕРЖАНИЕ

1. Об устройстве.....	3
2. Использование.....	4

1. Об устройстве



- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Комплексное лечение; | 7. Массаж ног; |
| 2. Массаж; | 8. Напряжение; |
| 3. Растяжка мышц; | 9. Массаж под давлением; |
| 4. Расслабляющий массаж; | 10. Шейный спондилез; |
| 5. Скребок терапия; | 11. Поясничный спондилез; |
| 6. Иглоукальвание; | 12. Баночная терапия. |

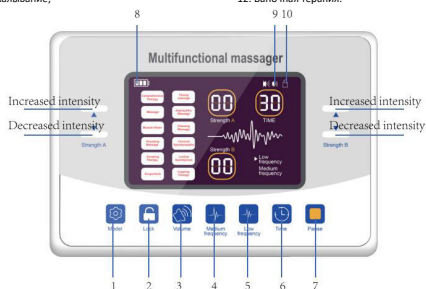

*Increased intensity - Повышенная интенсивность
*Decreased intensity - Снижение интенсивности

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. Режим; | 6. Время; |
| 2. Открыть/заблокировать экран; | 7. Пауза; |
| 3. Регулировка громкости; | 8. Питание; |
| 4. Выбор средней частоты; | 9. Громкость; |
| 5. Выбор низкой частоты; | 10. Блокировка экрана. |

2. Использование

Включение и выключение: нажмите клавишу «O», чтобы включить и выключить устройство. Переключение режима, нажмите кнопку «Model», чтобы переключить режим.

Регулировка интенсивности: нажмите клавишу «A», чтобы увеличить интенсивность, нажмите клавишу «V», чтобы уменьшить интенсивность.

Работа каналов, канал 1 — это левая область, канал 2 — это правая область, два канала могут работать независимо.

Если вы чувствуете дискомфорт во время использования продукта, немедленно прекратите его использование;

Во время использования, пожалуйста, снимите все металлические изделия с вашего тела.

Использование одной и той же детали не должно превышать 30 минут, а интервал между ними должен быть более одного часа;

Не снимайте насадки в рабочем состоянии;

При использовании этого продукта в первый раз плавно увеличивайте интенсивность;

Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте продукт.

Шаг 1: Включите устройство;

Шаг 2: Выберите время (по умолчанию 30 минут). Интервал времени составляет 10–60 минут;

Шаг 3: Выберите режим;

Шаг 4: Выберите интенсивность.



Массаж рук:

Упражнения на подъем запястья, растяжение пальцев, снижение мышечного напряжения (комплексная терапия, массаж, напряжение мышц, разминающий массаж, скребок терапия).



Увеличение силы подъема рук, улучшение полувывихов плеч (массаж, растяжка мышц, скребок терапия, иглоукальвание, пресовый массаж).




Массаж ног:
Комплексная операция, улучшение мышечной атрофии, улучшение мышечной силы (комплексная терапия, растяжка мышц, направленный массаж).



Талия:
Операция на талии: способствует восстановлению мышц и мягких тканей, снимает болезненность в талии (комплексный, массаж, разминание, терапия крепатуры, поясничный спондилез).



Массаж плеч:
Массажная операция: для снятия боли в шее, плечах, талии и ногах, чтобы облегчить роль расслабления (надавливающий массаж, шейный спондилопатия, поясничный спондилез, баночная терапия).

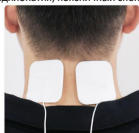

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!