



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Массажер для ног FEET RELAX Gold
(LMS-Z302)**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Меры предосторожности	3
1.1 Техника безопасности	3
1.2 Условия использования.....	4
1.3 Не рекомендовано использование	4
1.4 Кнопки	4
2. Внешний вид.....	5
3. Особенности и использование	6
4. Настройки.....	7
4.1 Функции.....	7
4.2 Перед использованием	7
4.3 Использование.....	7
5. Технические характеристики	8
6. Решение проблем.....	8
7. Обслуживание	9
7.1 Хранение	9
7.2 Чистка	9
7.3 Обслуживание.....	9

1. Меры предосторожности

1.1 Техника безопасности

- Обязательно внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием, чтобы обеспечить безопасность и правильное использование продукта.
- Обязательно используйте изделие в соответствии с инструкциями, приведенными в данном руководстве.
- После использования или перед чисткой изделия отключите питание.
- Всегда осторожно используйте функцию обогрева, чтобы избежать серьезных ожогов.
- Не используйте продукт на слишком нечувствительную и сверхчувствительную кожу или на участки тела с плохим кровообращением.
- Никогда не позволяйте детям или лицам с физическими или психическими расстройствами использовать функцию обогрева, так как неправильная эксплуатация может быть опасной.
- Во избежание возгорания, поражения электрическим током или травм, вызванных перегревом, никогда не используйте устройство под подушкой или одеялом.
- Не накрывайте устройства во время использования во избежание возникновения неисправности или повреждения электроники в результате перегрева двигателя.
- Дети, лица с физическими и психическими расстройствами и инвалиды должны находиться под присмотром при использовании изделия.
- Пожалуйста, немедленно прекратите использование массажера, если вы чувствуете себя некомфортно.
- Прекратите использование устройства, если шнур питания или вилка повреждены, была нарушена неправильная работа массажера, или изделие уронили, повредили или уронили в воду. Обратитесь в сервисный центр для проверки и ремонта.
- Не используйте для ремонта запасные части, которые не рекомендованы производителями.
- Не вставляйте и не роняйте предметы в отверстия устройства.

- Пожалуйста, прекратите всю работу с устройством перед отключением продукта от источника питания.
- Этот продукт нельзя использовать для самодиагностики или лечения. Пожалуйста, обратитесь за профессиональной медицинской помощью, если вам нужна диагностика или лечение.

1.2 Условия использования

- Не используйте изделие во влажной или пыльной среде, чтобы избежать поломки.
- Не используйте этот продукт при температуре в помещении выше 40 °С.
- Не используйте аппарат на открытом воздухе.
- Не используйте массажер вблизи электрических обогревателей или духовок, а также под прямыми солнечными лучами.

1.3 Не рекомендовано использование

Требуется консультация лечащего врача перед использованием массажера людям


- Которые проходят лечение или ощущают физический дискомфорт при использовании.
- Страдающим гипертонией, сердечными заболеваниями, церебральным атеросклерозом и церебральным тромбозом.
- Больным раком.
- Беременные или в период менструации.
- Страдающие остеопорозом.
- Пользующиеся кардиостимулятором или другими имплантируемыми медицинскими устройствами.
- Страдающие острыми заболеваниями.
- Несовершеннолетние.

1.4 Кнопки

- Не нажимайте кнопку мокрыми руками.
- Берегите кнопки от воды или другой жидкости. Не засыпайте при использовании изделия.

- Не используйте массажер, когда вы пьяны или чувствуете себя некомфортно. Не прикасайтесь непосредственно к массажной подушке руками, суставами ног, коленями, грудью и животом.
- Не используйте это устройство более тридцати минут подряд
- Не используйте, если тканевый чехол поврежден.
- Не используйте продукт за час до и после еды, чтобы избежать неблагоприятных последствий.
- Не включайте функцию обогрева, если изделие используется при низкой комнатной температуре. Перед включением обогрева рекомендуется постепенно довести температуру до нормального диапазона.
- Если изделие используется сразу после переноса из холодного помещения в теплое, накопление водяного пара внутри изделия может повлиять на его нормальную работу или даже вызвать поломку. Рекомендуется поместить продукт в нормальную комнатную температуру на час, прежде чем начать использовать его после переноса.

2. Внешний вид

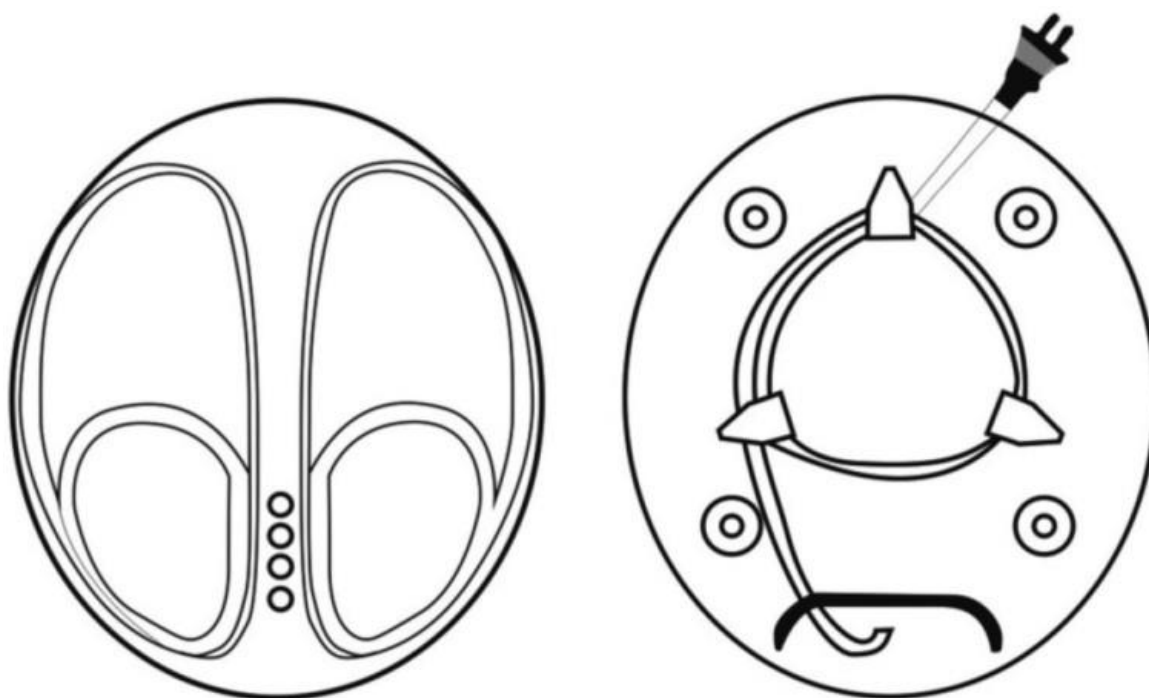

1. Центральная плоскость: пять независимых кнопок контролирует функции и настройки массажера.
2. Центральный отсек массажера обеспечивает акупрессурное воздействие на ноги с подогревом.

3. Передний отсек массажера. Массаж, акупрессура на переднюю часть подошвы
4. Задний отсек массажера. Массаж, акупрессура на пятки.
5. Внутренняя воздушная подушка поддерживает давление в отсеке для ног.
6. Снимаемый тряпичный чехол, который можно стирать.
7. Нижняя панель: крепления для шнура питания помогают поддерживать порядок дома.

3. Особенности и использование


- Дизайн в форме яйца, модный и красивый, легкий и портативный;
- Комбинация различных функций, включая, разминание валиком и разминание толчками, акупрессура, давление воздуха и нагрев;
- Подушечка для массажа, обеспечивает всесторонний массаж и глубокую акупрессуру для очистки меридианов тела и рефлекторные зоны стопы;
- Съёмный и моющийся чехол, позволяющий поддерживать чистоту массажера в любой момент;
- Крепление провода питания, приносящий удобство в жизнь.

Использование



4. Настройки

4.1 Функции

- **88** – Дисплей;
- **Timer** -Таймер. Установка времени работы массажера.
- **Mode** – Режим. Переключение режимов работы массажера. У данного массажера два режима.
- **Intensity** -Интенсивность. Кнопка отвечает за регулировку уровня интенсивности.
- **Heating** – Подогрев. Кнопка отвечает за включение и отключение подогрева при массаже.
-  - Включение / Выключение. Включает и отключает массажер.

4.2 Перед использованием

- Убедитесь в отсутствии повреждений на устройстве.
- Установите массажер в условиях, которые соответствуют требованиям. На устойчивую поверхность.

4.3 Использование

- Размотайте кабель питания и подключите его к сети.
- Нажмите кнопку включения, чтобы запустить массажер в режиме по умолчанию.

Отрегулируйте настройки под ваши потребности, нажимая кнопки **Heating**, **Intensity**, **Mode** и **Timer** соответственно.

5. Технические характеристики

- Напряжение: 110-240 В;
- Мощность: 50 Вт;
- Время работы: 15 минут.

6. Решение проблем

Пожалуйста, обратитесь к данной таблице с рекомендациями, если во время использования этого аппарата возникли проблемы.

Изделие может быть возвращено в сервисный центр или проверено и отремонтировано уполномоченными специалистами.

Проблема	Причина	Решение
Не работает	1. Не подключен к сети электропитания.	1. Подключите вилку массажера к сети. Убедитесь в надежном соединении.
	2. Не нажата кнопка включения.	2. Нажмите кнопку.
Неожиданно прекратил работу	1. Отключение питания.	1. Проверьте подключения.
	2. Прошло 15 минут работы.	2. Перезапустите устройство.
	3. Устройство переработало или перегрелось.	3. Перезапустите устройство, когда оно остынет.
	4. Слишком сильное давление, массажные ролики перестали работать.	4. Перезагрузите массажер.

7. Обслуживание

7.1 Хранение

- Массажёр следует поместить в цветную коробку и хранить в безопасном, сухом, хорошо проветриваемом и прохладном месте, когда он не используется.
- Не перекручивайте при включении шнур питания.
- Не подвешивайте и не поднимайте устройство за шнур.
- Не царапайте острыми предметами поверхность изделия.
- Не оставляйте массажер под прямыми солнечными лучами или в условиях высокой температуры.

7.2 Чистка

- Перед очисткой убедитесь, что кнопка питания выключена, и отсоедините шнур питания.
- Используйте сухую ткань для чистки поверхности устройства.
- Не подвешивайте изделие за шнур.

Примечание

Не используйте коррозионно-активные моющие средства, такие как бензол или растворитель, для очистки устройства.

7.3 Обслуживание

- Держите массажер в чистоте и в условиях с невысокой влажностью.
- Пожалуйста, используйте чехол, который будет защищать массажер от пыли (не входит в комплект), чтобы накрыть устройство. Чехол предотвратит попадание пыли в него, если аппарат не используется в течение длительного периода времени.

Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**