



# MINICAM24

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**  
**Массажер для глаз EYE RELAX (с**  
**Bluetooth) (JRW 919)**



## СОДЕРЖАНИЕ

|   |          |
|---|----------|
| <b>МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ .....</b>                        | <b>3</b> |
| <b>ВВЕДЕНИЕ ПРОДУКТА .....</b>                        | <b>3</b> |
| Особенности: .....                                    | 3        |
| Область применения:.....                              | 4        |
| Противопоказания:.....                                | 4        |
| <b>КОМПЛЕКТАЦИЯ ТОВАРА .....</b>                      | <b>4</b> |
| <b>НАИМЕНОВАНИЕ И ФУНКЦИЯ КАЖДОЙ ЧАСТИ .....</b>      | <b>4</b> |
| <b>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА.....</b>                    | <b>5</b> |
| <b>ЧИСТКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТА .....</b> | <b>6</b> |
| <b>ОБЩИЕ НЕИСПРАВНОСТИ И РЕШЕНИЯ.....</b>             | <b>7</b> |

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Если вы носите контактные линзы, пожалуйста, снимите контактные линзы перед использованием этого продукта.

Если в маске есть грязь или посторонние вещества, пожалуйста, протрите ее влажной тканью перед использованием, чтобы избежать случайного попадания в глаза.

Во время процесса зарядки продукт не поддерживается для запуска (зарядка выполняется в рабочем состоянии, продукт запускает программу самозащиты и перестает работать автоматически).

Не используйте массажер для глаз во время прогулки на улице или вождения.

Не пользуйтесь массажером для глаз в жарких и влажных местах.

## ВВЕДЕНИЕ ПРОДУКТА

Массажер для глаз, использует микрокомпьютерную технологию управления микросхемой для управления имитацией всей человеческой природы, применения давления воздуха, что представляет собой совершенно новую концепцию ухода за глазами под контролем давления воздуха в компьютере для всего диапазона мышц вокруг глазное давление, вибрация и в сочетании с внутренней функцией и функцией дальнего инфракрасного нагрева, глазные кислотные трюмные боли, боль в глазах, снимают усталость глаз.

### **Особенности:**

Устройство для массажа глаз может быть подключено к мобильному телефону Bluetooth Play Music

Портативное беспроводное использование, режим зарядки USB;

Технология микросхемы микрокомпьютера дистанционного инфракрасного обогрева;

5 техник массажа 15 минут с автоматическим выбором времени;

Массаж надувной подушки (массируйте мышцы вокруг глаз, подбирая и выпуская воздух); Выходное напряжение 5 В более надежно, одно нажатие клавиши просто и удобно.

Новый режим вибрации.

**Область применения:**

Для глаз.

**Противопоказания:**

Отключение травм или воспаления глаз.


При наличии симптомов глазных болезней нельзя применять общие хирургические операции на глаз, глаукому, катаракту, отслоение сетчатки и другие серьезные заболевания глаз. использоваться.

Для пациентов с глубоким инсультом, гипертонией и гипотонией, пожалуйста, сначала проконсультируйтесь с профессиональным врачом.

Если вы чувствуете какой-либо дискомфорт во время использования, пожалуйста, немедленно прекратите использование. Пожалуйста, не используйте массажер для глаз во время питья или физического дискомфорта.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ ТОВАРА

Устройство для массажа глаз, кабель для передачи данных, штепсельная вилка, руководство по эксплуатации.

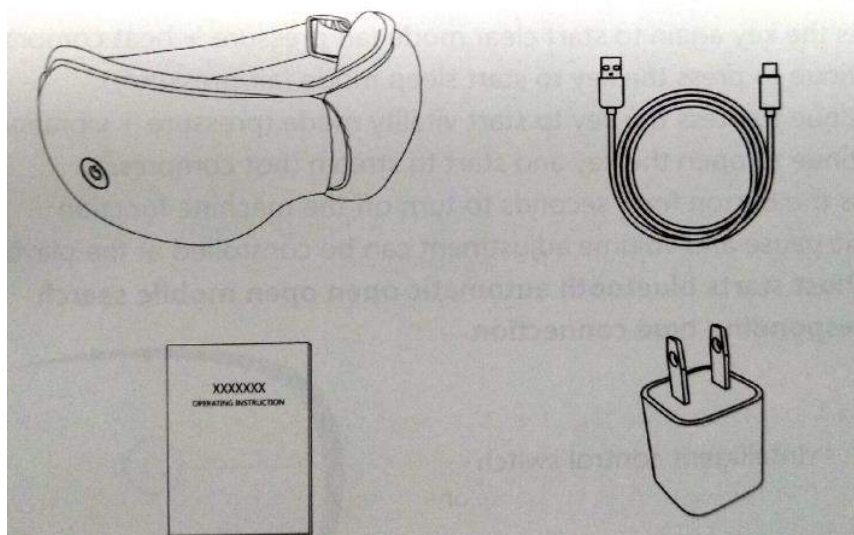


### НАИМЕНОВАНИЕ И ФУНКЦИЯ КАЖДОЙ ЧАСТИ

1 Операция одним щелчком

- (1) нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы запустить комплексный режим (давление + вибрация + горячий компресс)
- (2), нажмите кнопку еще раз, чтобы запустить режим очистки (давление воздуха + нагрев) сжимать)
- (3) продолжать нажимать клавишу, чтобы перейти в спящий режим (давление воздуха)
- (4) продолжать нажимать клавишу, чтобы запустить режим жизнеспособности (давление + вибрация)
- (5) продолжать открывать ключ и начинать растягиваться (горячий компресс)
- (6) нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы выключить функцию машины
- (7) можно приостановить воспроизведение музыки и регулировать громкость в конце воспроизведения
- (8) хост начнет Bluetooth-соединение автоматически открывать открывать мобильный поиск подключения соответствующего типа


Интеллектуальная кнопка управления

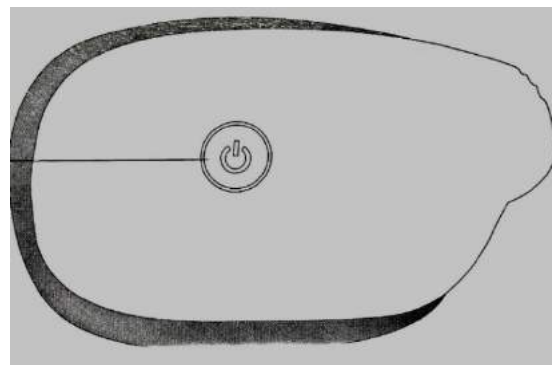

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА

### Способ использования

1. Подготовка перед использованием
  - (1) осторожно выньте массажер для глаз
  - (2) установите устройство для массажа глаз в положение для глаз
2. Использование (как показано на рисунке)

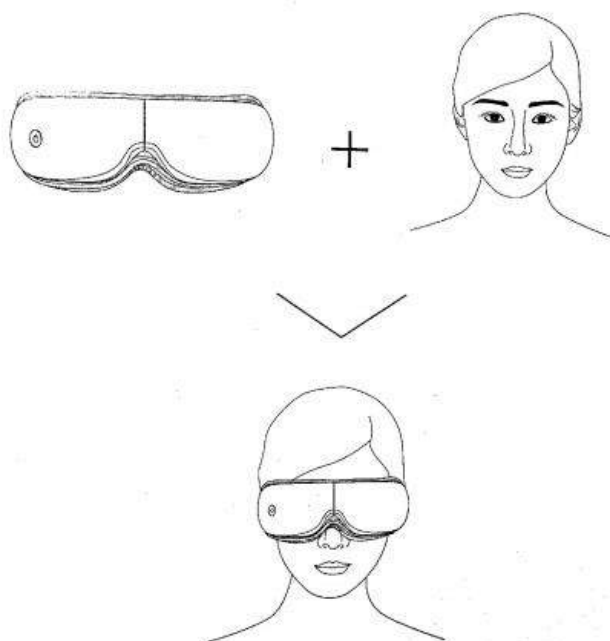


## ЧИСТКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТА

Чистка, хранение и техническое обслуживание изделия

### 1. Чистка и техническое обслуживание изделия.

В случае попадания воды на изделия протрите его сухой мягкой тканью.

Если он особенно грязный, вы можете протереть его медицинским спиртом.

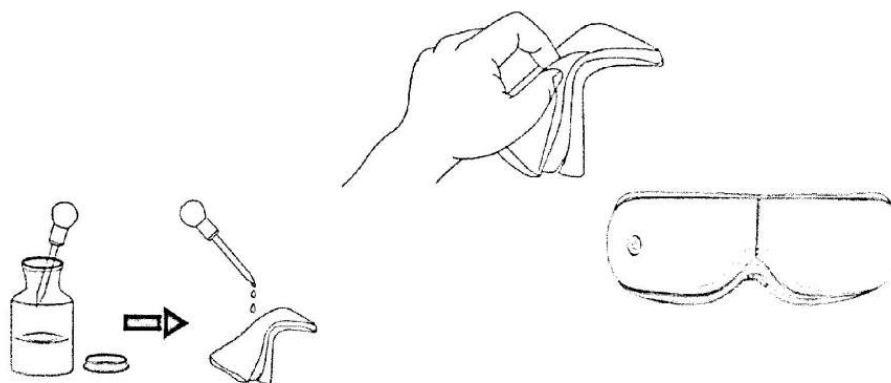

### 2. Храните в сухом, вентилируемом и чистом месте.

Храните в недоступном для детей месте.

Не разбирайте главный двигатель без разрешения.

## ОБЩИЕ НЕИСПРАВНОСТИ И РЕШЕНИЯ

Невозможно выполнить загрузку:

1. Если заряд батареи слишком низкий, немедленно зарядите
2. Защита хоста (с электричеством) подключите зарядное устройство, зарядите и дайте хосту автоматически снять защиту (зарядка в течение 5 секунд)
3. Аккумулятор не заряжен и зарядное устройство повреждено.
4. Слишком слабое давление.

**Примечание:** все работы по техническому обслуживанию должны выполняться нашим авторизованным персоналом.

**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**