



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Алкотестер «Alco 09»



СОДЕРЖАНИЕ

АЛКОТЕСТЕР	3
ИНСТРУКЦИЯ	4
УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕИ	4
ТЕСТ НА АЛКОГОЛЬ	4
ФУНКЦИЯ ФАКЕЛА	5
СЕКUNДОМЕР	5
ТАЙМЕР	6

АЛКОТЕСТЕР

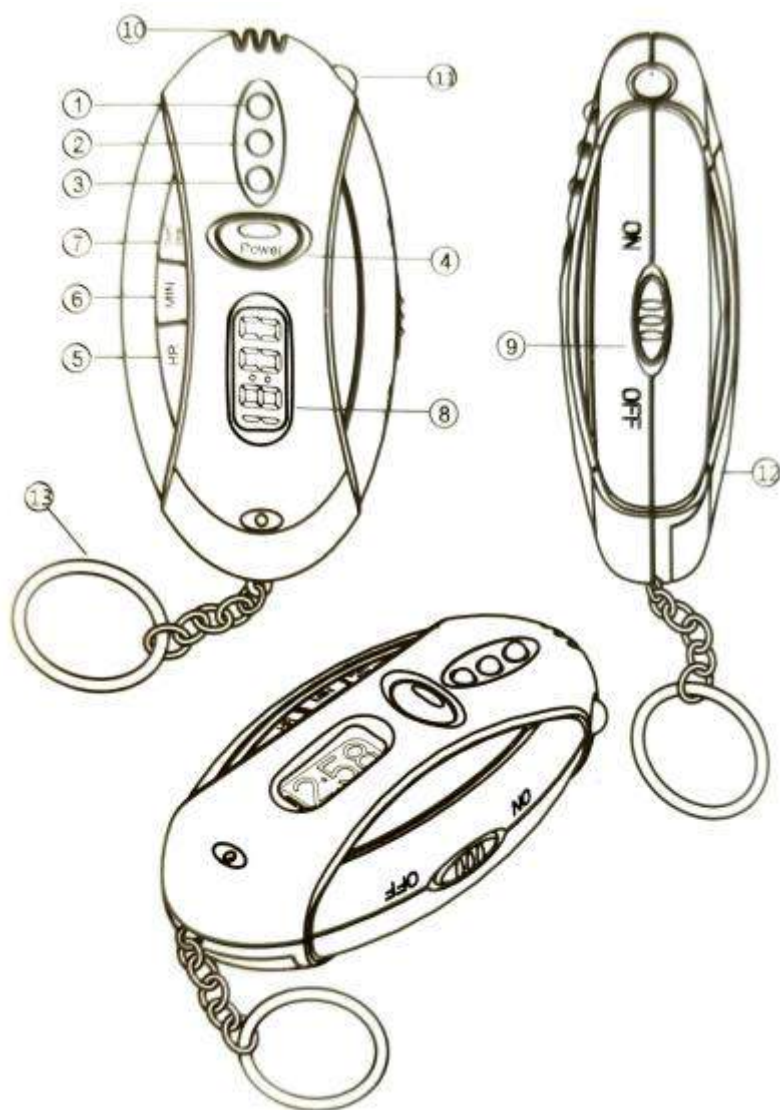

- (1) Красный светодиод
- (2) Желтый светодиод
- (3) Зеленый светодиод
- (4) Кнопка питания
- (5) Кнопка HR
- (6) Кнопка мин
- (7) Кнопка СТАРТ/ СТОП

- (8) ЖК-дисплей для таймера
- (9) Выключатель фонарика
- (10) Трубка
- (11) Фонарик
- (12) Батарейный Отсек
- (13) Брелок Для Ключей

ИНСТРУКЦИЯ

Особенности

1. 3-шаговый тест на алкоголь.
2. Быстрый ответ и резюме.
3. Фонарик (оранжевый светодиод).
4. Брелок Для Ключей.
5. Счетчик и таймер обратного отсчета
6. Используйте два 1.5V " AAA " /UM-4 щелочные батареи

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕИ

1. Откройте крышку батарейного отсека на задней панели устройства.
2. Вставьте две высококачественные щелочные батареи типа " AAA " (UM-4) (нет в комплекте) с правильной полярностью, как указано.
3. Закройте крышку батарейного отсека.
4. Когда светодиодные индикаторы для теста на алкоголь или свет фонарика становятся тусклыми, замените батарейки на новые.

ТЕСТ НА АЛКОГОЛЬ

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания, зеленый светодиод будет продолжать гореть для готовности примерно через 10 секунд, устройство войдет в состояние тестирования.

2. Как пройдет 10 секунд, затем выдохните в трубу и посмотрите в результат теста (уровень алкоголя потребителя: BAC *) следующим образом:

Тип 1

- Горит зелёный индикатор: безопасность-- ниже 0.02% BAC (или 0.1 мг /л BRAC).

Горит жёлтый индикатор: внимание-от 0,02% ВАС (или 0,1 мг/л ВРАС) до 0,05% ВАС (или 0,25 мг/л ВРАС).

- Горит красный и жёлтый индикатор: опасность-более 0,05% ВАС (или 0,25 мг/л ВРАС).

Тип 2

- Горит зелёный индикатор: безопасность--под 0.05% ВАС (или 0,25 мг / л брак).

Горит жёлтый индикатор: внимание-0,05% ВАС (или 0,25 мг / л ВРАС) до А. 08% ВАС (или 0,40 мг/л ВРАС).

- Горит красный и жёлтый индикатор: опасно-свыше 0,08% ВАС (или В. 40мг/л Брач).

ВАС: концентрация алкоголя в крови.

1. Пожалуйста, убедитесь, что вы продолжаете удерживать кнопку питания во время теста на алкоголь.
2. Для того чтобы получить точный результат теста, рекомендуется проверить ваш ВАС по крайней мере через полчаса после употребления алкоголя.
3. При длительном бездействии красные и желтые светодиоды будут долго гореть во время теста на алкоголь, так как устройство нуждается в большем времени для прогрева. Пожалуйста, нажмите кнопку питания несколько раз подряд, пока тестер не сможет работать.
4. Не используйте фонарик во время теста на алкоголь.

ФУНКЦИЯ ФАКЕЛА

Установите переключатель факела в положение <ON>, чтобы включить. Пожалуйста, не используйте функцию проверки на алкоголь в этом состоянии.

СЕКУНДОМЕР

1. Нажмите кнопку СТАРТ/СТОП, чтобы запустить таймер обратного отсчета, когда значение параметра равно 0: 00.
2. Нажмите кнопку СТАРТ / СТОП еще раз, чтобы остановить таймер обратного отсчета.

3. Несколько раз нажмите кнопку СТАРТ / СТОП, чтобы переключить счетчик-вверх по таймеру "старт" или "стоп".
4. Чтобы сбросить таймер обратного отсчета до 0: 00, нажмите кнопки HR и MIN в то же время.

ТАЙМЕР

1. Нажмите кнопки HR или MIN, чтобы установить час или минуту обратного отсчета.
2. Нажмите кнопку СТАРТ / СТОП, чтобы запустить таймер обратного отсчета.
3. Нажмите кнопку СТАРТ / СТОП еще раз, чтобы остановить таймер обратного отсчета.
4. Несколько раз нажмите кнопку СТАРТ / СТОП для запуска или остановки таймера обратного отсчета.
5. В последние 5 и 10 минут будет подан 2-секундный предупредительный сигнал.
6. Сигнал тревоги таймера обратного отсчета длится 60 секунд. Нажатие кнопок HR и MIN одновременно может остановить сигнал тревоги раньше.
7. Чтобы сбросить таймер обратного отсчета до 0: 00, одновременно нажмите кнопки HR и MIN.

Примечание: данный алкотестер измеряет результаты в система ВАС

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**